

**KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO**  
**Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo**

**NAVODILO ZA IZVEDBO RAPI TEST LH**

Rapi test® LH je namenjen za določitev prisotnosti človeškega luteinizirajočega hormona (LH) v vzorcih seča (urina). Ta hormon povzroči zorenje jajčne celice in razpok jajčnega mešička (ovulacija).

Koncentracija LH-ja začne rasti 24 – 36 ur pred ovulacijo, 12 ur zatem doseže vrh in takrat ga je mogoče s tem testom ugotoviti tudi v urinu. V različnih postopkih zdravljenja neplodnosti je pomembno vedeti, kdaj nastopi LH vrh, kajti od tega so odvisni nadaljnji koraki. Zanesljivost ugotavljanja LH vrha pa lahko pričakujemo le s pravilno izvedbo testa.

**Shranjevanje:**

- Testno opremo shranjujemo na sobni temperaturi do 30° C.
- Do uporabe mora biti vrečka s testno opremo zapečaten.

**Izvedba:**

1. Test vzamemo iz zapečatenе vrečke,
2. urin zberemo v čisto posodico in počakamo le toliko, da doseže sobno temperaturo,
3. s priloženo kapalko naneseemo 3 do 4 kapljice urina na vzorčno odprtino (S),
4. čez 3 do 4 minute odčitamo rezultat, vendar ne kasneje kot čez 10 minut.





**Interpretacija rezultatov:**

**Pozitiven rezultat:**

Dve barvni črti enake intenzitete;  
ena na C, druga na T ali testna črtica (T)  
temnejša od kontrolne (C).

**Negativen rezultat:**

Na T se ne pojavi nobena barva  
ali je testna črtica (T) svetlejša  
od kontrolne (C).

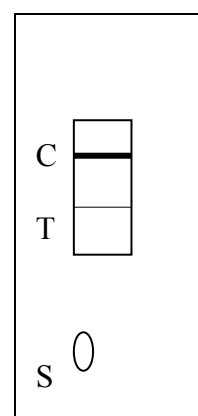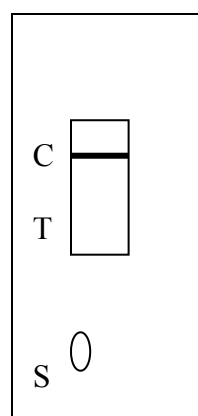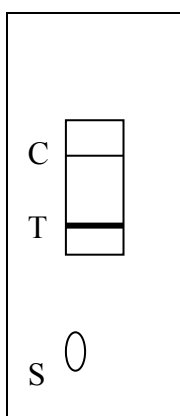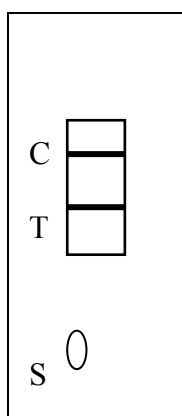

V primeru nejasnosti ali težav pri izvedbi in interpretaciji testa nas pokličite na **tel. 02/ 321 24 62 med 9. in 12. uro ali med 14. in 15. uro** ali pa pošljite e-pismo na **ivf.mb@ukc-mb.si**. Na isto številko in ob istem času sporočite tudi, ko je test pozitiven.

Če je LH test pozitiven v soboto ali nedeljo, nas obvestite v ponedeljek, če je pozitiven na praznik, nas obvestite naslednji delovni dan.